

Sécurité

- Permet l'évacuation systématique du Protoxyde d'Azote
- Les DM au contact du patient restent à usage unique

Simplicité

- Protocole d'utilisation simple et déjà utilisé à l'hôpital
- Ne nécessite pas un comptage du nombre d'utilisations

Economie

- Facilite la réutilisation du DM qui n'est pas en contact direct avec le patient
- Polyvalent: s'adapte aux différentes indications



Avec filtre antibactérien intégré

Circuits Performance pour gaz MEOPA

Circuits adaptés à un usage intensif

«La Performance pour une meilleure efficacité»


Les circuits Performance sont adaptés à un usage intensif, ils permettent la réutilisation de la Tubulure pour gaz expirés, pendant 7 jours, conformément aux recommandations de la SFAR (Cf recommandations sur l'hygiène en anesthésie – SFAR 1997 – modifiées le 11.04.2013).

L'utilisation systématique de la tubulure pour gaz expirés, l'étanchéité de l'ensemble du circuit et l'adaptation du débit de gaz à la capacité respiratoire du patient, minimisent le risque de toxicité du Protoxyde d'Azote vis-à-vis du personnel soignant en particulier.



Filtre

permet de protéger et de réutiliser la tubulure Performance pendant 7 jours (quel que soit le nombre de patients).

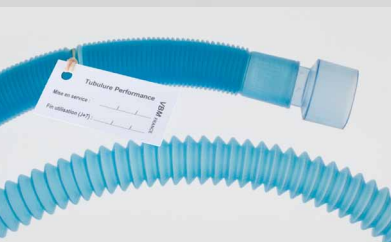

Tubulure extensible

permet un gain de place significatif (1,5 m > 5 m), elle est équipée d'une étiquette pour faciliter la gestion de son remplacement.



Code couleur

La gamme Performance se caractérise par une unité de couleur bleue afin de repérer visuellement la compatibilité des composants.



Information pour commander

Circuit Performance MEOPA

non stérile

Désignation	REF	Boîte
Circuit Performance adulte (ballon de 2 l), à usage unique	CM30-00-001P	50
Circuit Performance pédiatrique (ballon de 1 l), à usage unique	CM30-00-002P	50
Tubulure Performance réutilisable si connectée aux circuits Performance: CM30-00-001P & CM30-00-002P	TACC500/30MP	10

Pour plus d'informations, veuillez contacter VBM France.

VBM France

ZAC de la Ferrage | Avenue Maréchal Leclerc | 13980 Alleins | France

Tél: 04 42 46 79 53 | Fax: 04 42 46 79 54 | e-mail: info@vbm-medical.fr | www.vbm-medical.fr

