

Pertinence Clinique
- Recommandations
de la DAS 2015

Sécurité patient
- Kit préassemblé
- Prêt à l'emploi

Formation & Education
- Kits non stériles
- Mannequin spécial
pour coniotomie

Plan D: Emergency front of neck access
Scalpel cricothyrotomy

"CICO"
can't intubate,
can't oxygenate



ScalpelCric

Kit de coniotomie conforme à la technique chirurgicale « scalpel-bougie »

Kit de coniotomie ScalpelCric

Le ScalpelCric de VBM est un kit chirurgical pour la coniotomie selon la technique « scalpel-bougie ». L'ensemble a été développé pour correspondre aux dernières recommandations de la DAS 2015*.

Basé sur la simple description de « incision, rotation, bougie, tube endotrachéal », le kit ScalpelCric est prévu pour faciliter la pratique de la technique « scalpel-bougie ».

– conforme aux recommandations de la DAS 2015 – Prêt à l'emploi

Chaque composant contribue à rehausser la sécurité et l'efficacité de la technique. Le kit est conditionné dans une poche stérile spécifique avec chaque composant rangé dans l'ordre d'utilisation. Ceci limite le risque de confusion à l'instant critique de la procédure.

Scalpel #10, bougie 14Fr (40 cm) avec extrémité béquillée et arrondie, tube trachéal 6,0 mm avec ballonnet basse pression et extrémité émoussée, raccord-prolongateur de ventilation avec port d'aspiration, seringue pour gonflage ballonnet et lanière de fixation.




Contenu du kit



- 1 Scalpel #10
- 2 Bougie 14Fr (40 cm)
- 3 Tube trachéal 6,0 mm à ballonnet
- 4 Raccord-prolongateur
- 5 Seringue 10 ml
- 6 Lanière de fixation

Utilisation

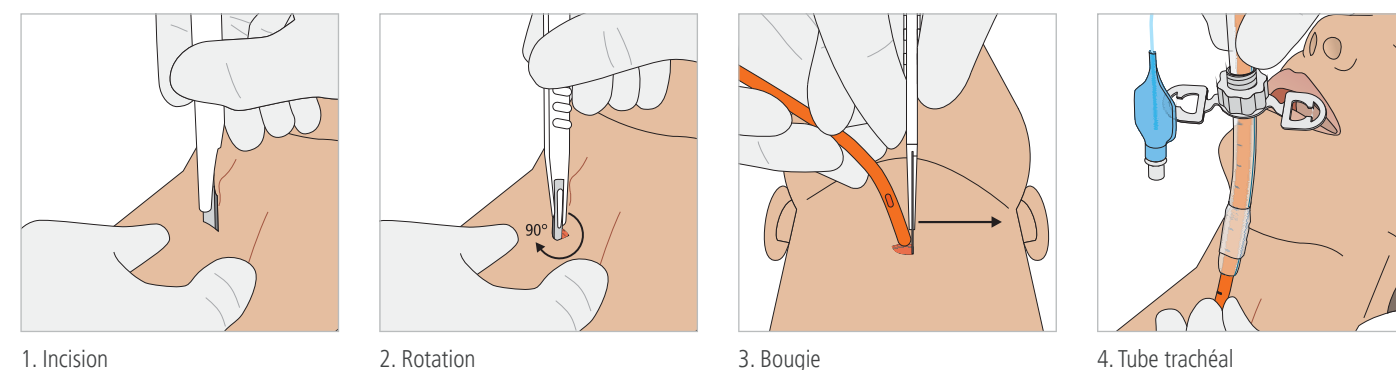

* DAS (Difficult Airway Society):
Guidelines for management of unanticipated difficult intubation in adults 2015

Formation & Education

„Anaesthetists must learn a scalpel technique and have regular training to avoid skill fade¹.“

„Training should be repeated at regular intervals to ensure skill retention².“

Matériel pour la formation



Kit d'entraînement ScalpelCric
non stérile

Crico-Trainer «Adelaïde»

pour coniotomie. Le design spécial avec une double peau simule les tissus sous-cutanés et la membrane cricothyroïdienne. La mâchoire amovible permet de simuler les situations difficiles. Livré avec 5 sets de double peau.

Crico-Trainer «Frova»

pour coniotomie et trachéostomie percutanée, complet avec 10 peaux et 10 trachées

Crico-Trainer «trachée animale»

pour la fixation d'une trachée d'origine animale, complet avec 10 peaux



Références

1. Baker PA, Weller JM, Greenland KB, Riley RH, Merry AF. Education in airway management. *Anaesthesia* 2011; 66 (Suppl 2): 101–11
2. Difficult Airway Society 2015 guidelines for management of unanticipated difficult intubation in adults.

Informations pour commander

	REF	VE
ScalpelCric, stérile	30-08-447-1	1
ScalpelCric, non stérile (Kit d'entraînement)	30-08-447	1
Crico-Trainer «Adelaïde»	30-14-700	1
Crico-Trainer «Frova»	30-14-000	1
Crico-Trainer «trachée animale»	30-14-500	1